




Az innovatív lázmérő

2020.04.16.

Innovatîv projekte

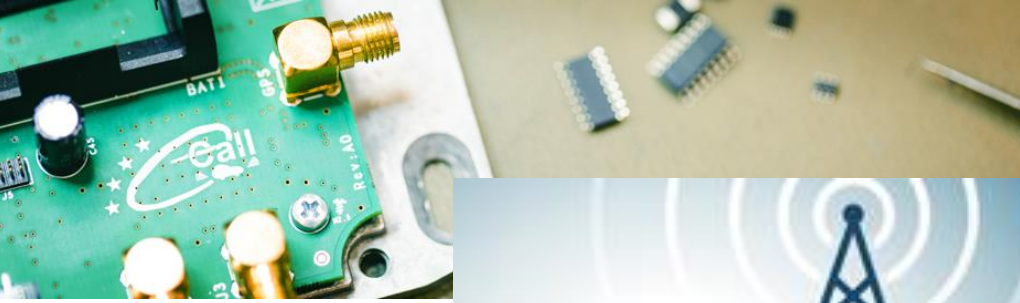

112
SOS



Evrak doğrulamak için: <https://e-belge.sanayi.gov.tr/> Belge Kodu: e4a5f2af-98f4-40e1-b2fb-6ad35b107147 ile erişebilirsiniz.

Albacomp okos h m r 




Evrak dođrulamak iin: <https://e-belge.sanayi.gov.tr/> Belge Kodu: e4a5f2af-98f4-40e1-b2fb-6ad35b107147

ile eriřebilirsiniz.

Hőmérő projekt bemutatása

- Folyamatos testhőmérséklet mérés / monitorozás
- Modern technológiák az eszközben
- Elegáns és sokoldalú megjelenés a szoftverben
- Android és iOS mobil alkalmazások
- Webfelület a részletes áttekintésért
- Központi adatbázis az előrejelzésekért

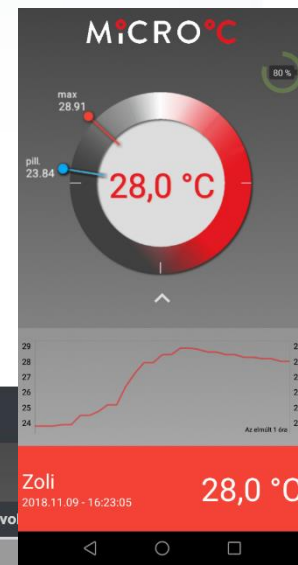A web interface showing a table of temperature measurements. The table has columns for 'Megnevezés', 'Azonosító', 'Időbélyeg', 'Hőmérséklet', and 'Távolság'. The data is color-coded by row: red, green, blue, and grey.

Megnevezés	Azonosító	Időbélyeg	Hőmérséklet	Távolság
10. mérőegység	10	2018-11-06 07:56:52	24.1 °C	
12. mérőegység	12	2018-11-06 07:57:00	25.48 °C	73 %
Dezso	14	2018-11-06 16:16:35	38.53 °C	100 %
Fruzi	13	2018-11-06 16:16:29	37.45 °C	100 %
Gyuri	1	2018-11-06 16:15:18	36.93 °C	76 %
Mark	3	2018-11-06 16:15:12	34.53 °C	100 %



A lázmérő...

- Bluetooth 5 képes SoC
- Ultra alacsony energiafogyasztás (akár 100 napos üzemidő)
- Akkumulátor védelmi áramkör (túltöltés/kisütés, rövidzár elleni védelem)
- Hőmérő IC:
 - Felbontása: 0,04°C
 - Pontossága: +/-0,2°C
 - Reagálási idő: 5-10 sec
- 5 másodpercenkénti adatküldés




A lázmérő...

- Optimalizált hardverköltések
- Könnyű és gyors alkatrészbeültetés, gyártás
- Automatizálható programozási, tesztelési folyamat

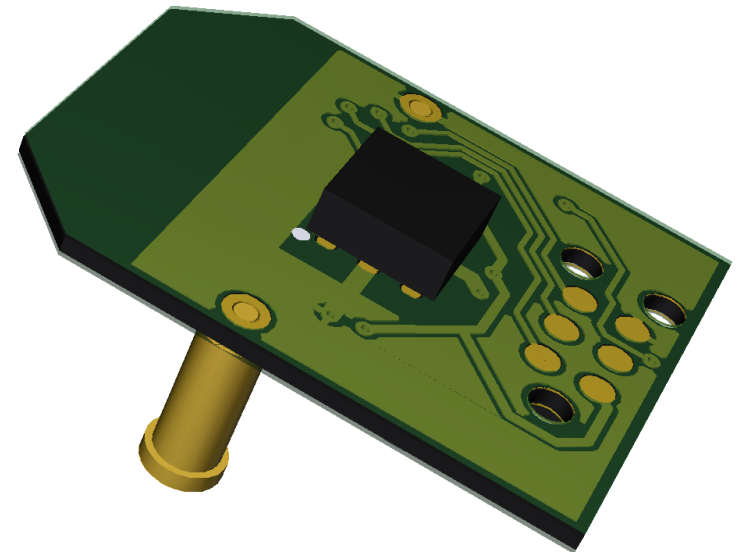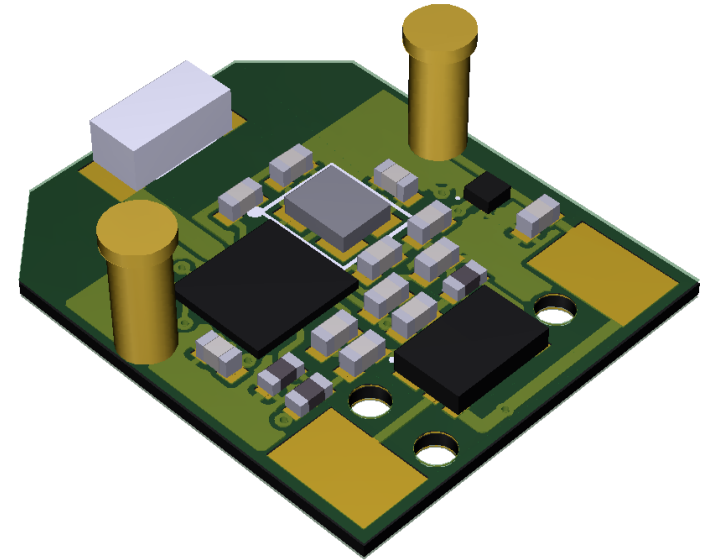

(Meg)nyerő design

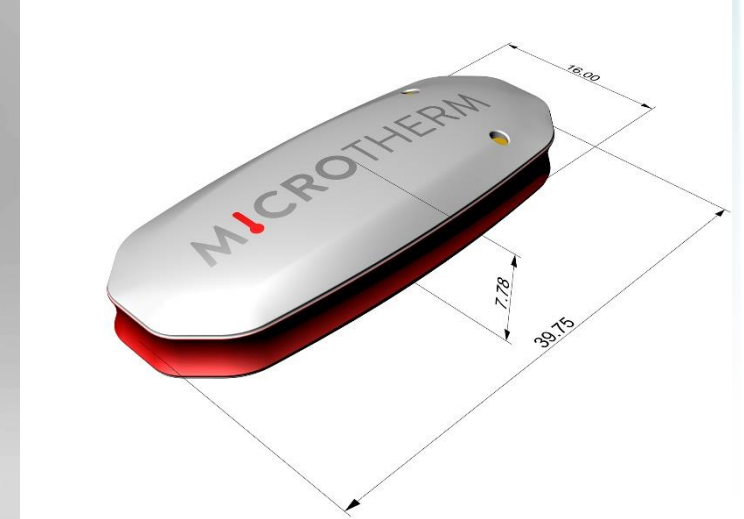

ALBACOMP

Evrak doğrulamak için: <https://e-belge.sanayi.gov.tr/> Belge Kodu: e4a5f2af-98f4-40e1-b2fb-6ad35b107147

ile erişebilirsiniz.

Alkalmazási lehetőségek

- Magán alkalmazások
 - Gyermek felügyelet
 - Idős családtag felügyelete
- Intézményi felhasználások
 - Oktatási intézmények
 - Időotthonok
 - Kórházak, egészségügyi intézmények
- Egyéb felhasználási lehetőségek



Adatelérési lehetőségek




Az informatikai háttér

- Android és iOS mobil alkalmazások
- Opcionális adatkoncentrátor
- Albacomp felhő adatbázis
- Webes felület



Mobilalkalmazások (Android és iOS)

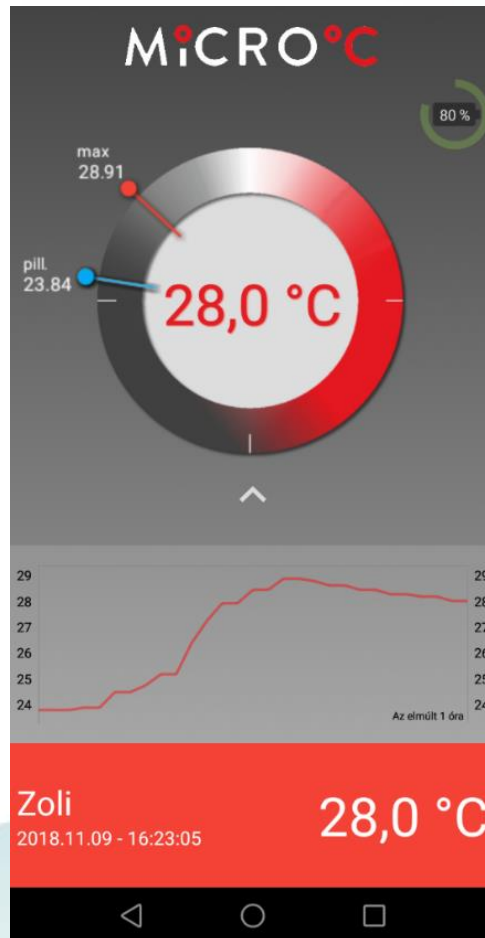

APP BEÁLLÍTÁSOK

ID	Név
3	Mark
13	Fruzsi
14	Dezso
11	Zoli
1	Gyuri

MENTÉS ÚJ ESZKÖZ

LÁZMÉRŐK KEZELÉSE

ID: 1

Név: Gyuri

Email cím: anonymstudio@gmail.com

Email értesítési határ: 38

Mobil Telefonszám: 1234567890

SMS értesítési határ: 40

MÉGSE OK



Webfelület

MiCRO°C Mérésegyesek

10 rekordot mutasson oldalanként! Keresés:

Megnevezés	Azonosító	Időbélyeg	Hőmérséklet	Távolság	Akkumulátor	
10. mérőegység	10	2018-11-06 07:56:52	24.1 °C		71 %	Részletek!
12. mérőegység	12	2018-11-06 07:57:00	25.48 °C		73 %	Részletek!
Dezso	14	2018-11-06 16:16:35	38.53 °C		100 %	Részletek!
Fruzsi	13	2018-11-06 16:16:29	37.45 °C		100 %	Részletek!
Gyuri	1	2018-11-06 16:15:18	36.93 °C		76 %	Részletek!
Mark	3	2018-11-06 16:15:12	34.53 °C		100 %	Részletek!
Zoli	11					


Megjelenített rekordok: 1-től 7-ig. Összesen: 7 bejegyzés

50 rekordot mutasson oldalanként! Keresés: 2018-11-06 11:40

Időbélyeg	Hőmérséklet	Akkumulátor
2018-11-06 11:40:11	22.39 °C	76 %
2018-11-06 11:40:15	22.56 °C	76 %
2018-11-06 11:40:20	22.56 °C	76 %
2018-11-06 11:40:30	22.56 °C	75 %
2018-11-06 11:40:35	22.56 °C	76 %
2018-11-06 11:40:40	22.56 °C	76 %
2018-11-06 11:40:45	22.64 °C	75 %
2018-11-06 11:40:50	22.64 °C	75 %


Megjelenített rekordok: 1-től 8-ig. Összesen: 8 bejegyzés. (filtered from 1,000 total entries)

Előző 1 Következő

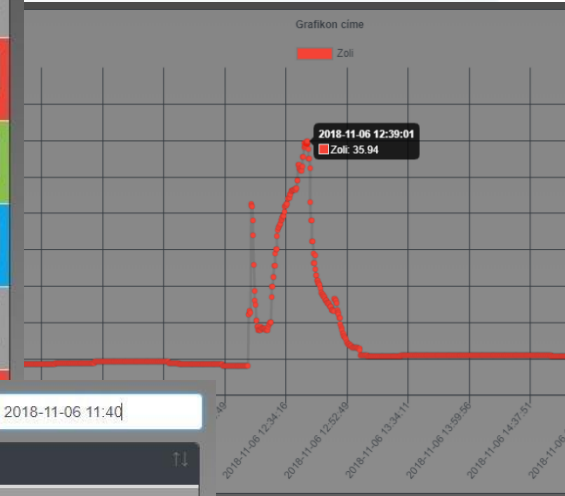

Kihívások


- Alkalmazási terület
- Mérési pont
- Kalibráció

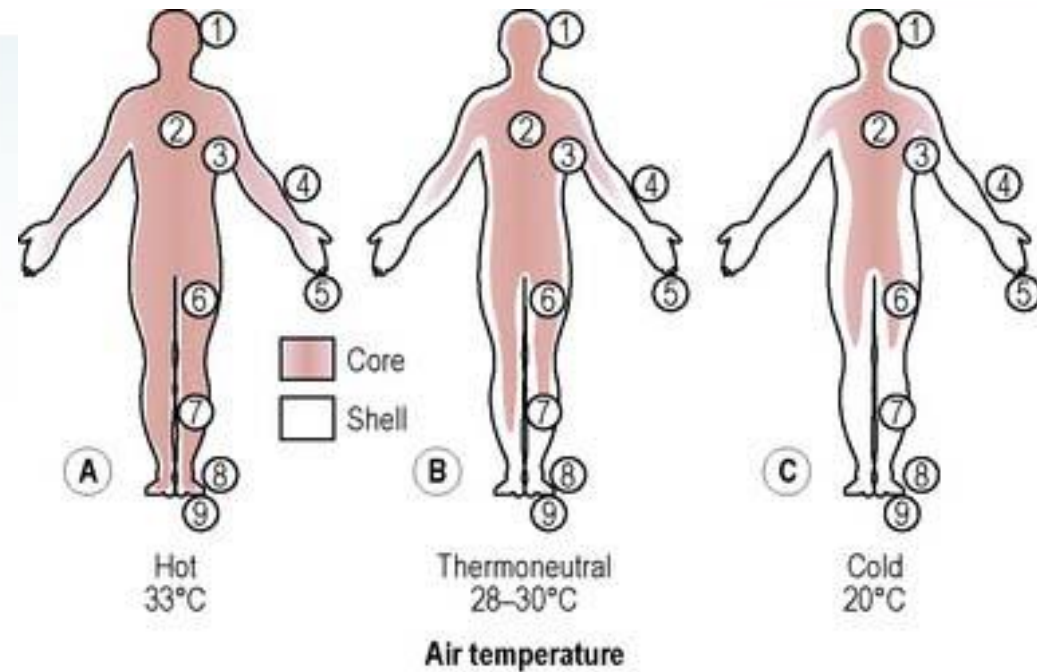

	Site	A (°C)	B (°C)	C (°C)
1	Scalp	36.0	34.8	32.8
2	Chest	35.8	34.5	31.3
3	Axilla	36.5	36.4	36.4
4	Arm	35.9	33.5	27.6
5	Finger	35.9	33.2	21.0
6	Thigh	35.2	33.4	27.8
7	Leg	35.3	30.1	25.2
8	Foot	35.5	29.7	22.7
9	Toe	36.2	29.1	21.4

Albacomp minősítések

- ISO 9001:2015
- ISO 27001:2013
- ISO 14001:2015
- IPC-A-610

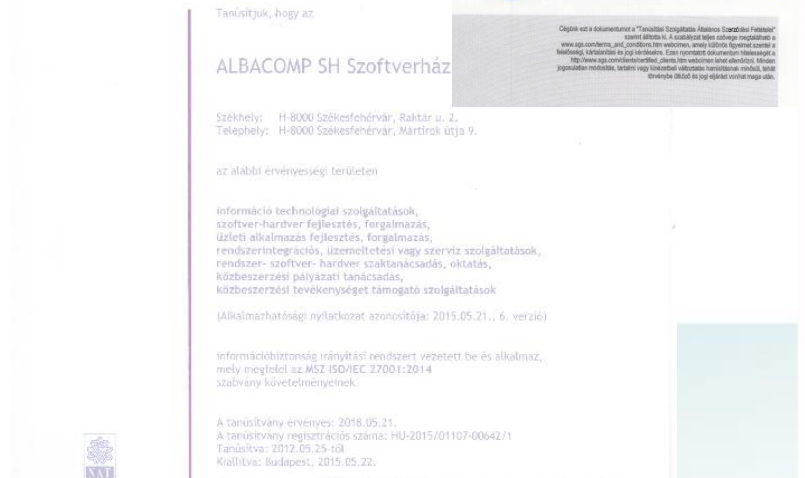

Evrak doğrulamak için: <https://e-belge.sanayi.gov.tr/BelgeKodu:e4a5f2af-98f4-40e1-b2fb-6ad35b107147> ile erişebilirsiniz.

